

**関西・中国エリア限定  
特別価格**

# 低価格で 麻酔器お買い得 キャンペーン



**20%  
OFF**

**送料  
無料**

~~390,000円~~

**20%OFF**

**312,000円**

キャンペーン期間  
**2025年1月1日～3月31日**

キャンペーン対象エリア：大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口

国産製品にも見劣りしない性能で、低価格を追求した簡易吸入麻酔器です。

北米・欧州を中心に性能・価格ともに認められ、国内でも使用される研究者様が急激に増加しております。

同メーカーの麻酔器は、イェール大学やハーバード大学など、世界中の研究機関や大学に10,000台以上導入されています。

# TAIJI 小動物用麻酔器

マウス、ラットなどの小動物から中型犬まで、より安全確実に麻酔する為に設計された吸入麻酔器です。ニードル付き超精密流量計を採用し、0~4 ℓ/min まで麻酔ガス濃度の安定性と正確な流量を追及しました。麻酔剤の注入量は 120m ℓ、長時間連続麻酔できます。

- 小動物の麻酔に適した 0~5%の麻酔混合気を長時間安定供給可能
- 操作が容易で日常の実験処理から長時間の手術まで広範囲に応用可能
- 麻酔ガス 2 ラインの同時制御が可能
- 超精密流量計を採用し正確で安定した麻酔ガスを供給
- 低流量から使用でき余剰ガスを最小限に抑制
- 導入、覚醒がきわめて迅速で覚醒状態も良好
- 引火性がなく、エーテル麻酔に比べて安全
- 麻酔深度の調整が容易

## 麻酔器の組み合わせ例




例 1. マスク・麻酔ボックスとの組み合わせ



例 2. デジタル脳定位固定装置との組み合わせ



例 3. デジタル式人工呼吸器との組み合わせ

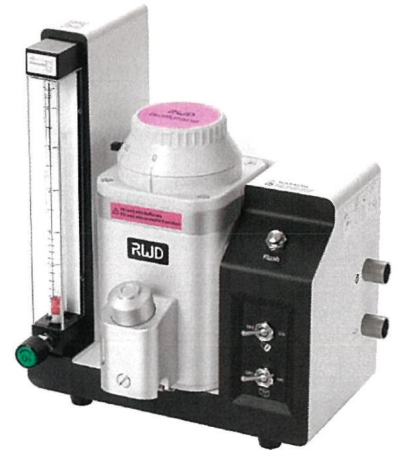

TAIJI 小動物用麻酔器 (イソフルラン)



TAIJI 小動物用麻酔器 (セボフルラン)

### TAIJI小動物用麻酔器仕様

流量	0 ~ 4 ℓ/min
濃度	0 ~ 5% (イソフルラン), 0 ~ 8% (セボフルラン)
充填容量	最大 120m ℓ
外寸	W260 × D220 × H300(mm)
重量	9kg

型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
TAIJI-IE	TAIJI小動物用麻酔器(イソフルラン)	390,000	312,000
TAIJI-SE	TAIJI小動物用麻酔器(セボフルラン)	390,000	312,000
R510-30	RWDエアープンプ	70,000	56,000

ご注文  
・  
お問い合わせ先

 **バイオリサーチセンター株式会社**

**大阪営業所**

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル2F  
TEL 06-6305-2130 FAX 06-6305-2132



www.brck.co.jp