

Droplet Digital PCR for Every Lab Every Budget



キャンペーン期間 2025.6.2～2025.10.31

絶対定量QX200導入応援キャンペーン

QX200™ Droplet Digital™ PCR (ddPCR™) システムは、その正確で再現性の高い核酸の絶対定量性能により、これまでに数多くの論文で活用されてきました。本キャンペーンでは、さらに多くの研究でddPCRの性能を利用していただけよう、QX200 ddPCRシステムを期間限定の特別価格でご提供します。ぜひ、ddPCRがもたらす高感度な核酸絶対定量をあなたの研究でご利用ください。

QX200 ddPCRシステム 製品特長

- 検量線不要で核酸の絶対定量が可能
- 0.1%以下の変異存在比を検出可能な、高感度で信頼性の高い定量性能
- qPCRと比べて阻害に強く、夾雑物が多いサンプルでも安定した結果を取得可能
- 2色同時検出 (FAM/EvaGreen®, HEX/VIC)
- プローブアッセイ、およびインターカレーション色素でのアッセイが可能
- 遺伝子変異解析、CNV解析、遺伝子発現解析、ドロップレット細胞封入アッセイなど、様々なアプリケーションを実施可能



QX200 ddPCR システム

通常価格：¥8,500,000

キャンペーン価格：

¥6,800,000

* キャンペーン価格での購入には事前エントリーが必要です

キャンペーンサイトはこちら

bio-rad.com/QX200PromoJP

BIO-RAD


Droplet Digital PCRの特長

ddPCRテクノロジー



微小区画の
作成方法

- 高感度・高精度の結果を得るため、最大20,000個のドロップレットを作成

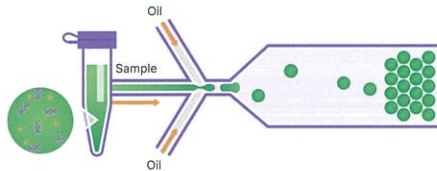


ddPCR
テクノロジーの
要点

- ドロップレットの正確性と再現性は、定量結果の正確性と再現性をもたらします。
- ドロップレット容量はddPCRシステム内でモニターされ、ゲーティングされています。
- 世界中のラボで使用され、その性能が検証されています。



実績に
裏付けられた
信頼性

- バイオ・ラッドのddPCRは13年以上の間、信頼性のある確実なデータを提供してきた実績があります。

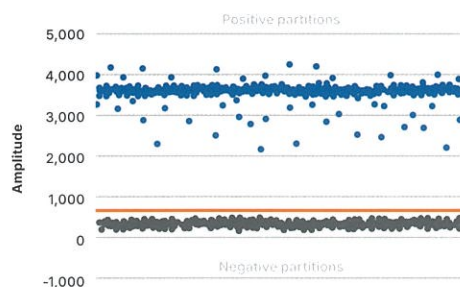

QX200 ddPCRシステム仕様

QX200 Droplet Generator

サンプル容量	20 µl
1サンプル当たりドロップレット数	20,000
1ラン当たりの最大サンプル数	8サンプル
スループット	2分 / 8サンプル
サイズ (W×D×H)	28 × 36 × 13 cm

QX200 Droplet Reader

読み取り区画数	10,000以上 / サンプル
励起光源	2 LED
検出器	Multi-Pixel Photon Counters
検出チャンネル	FAM/EvaGreen®, HEX/VIC
1ランあたりの最大サンプル数	96サンプル
スループット	2.5時間 / 96サンプル
サイズ (W×D×H)	66 × 52 × 29 cm

QX200スタートアップ応援オファー

本キャンペーンにエントリーしてQX200 ddPCRシステムを購入いただいた方には、機器と同時に購入される専用試薬消耗品を特別価格でご提供します！

オファー詳細はエントリー後にご案内します。

キャンペーン エントリーはこちら



本キャンペーンでの購入をご希望の際は、左記QRコード、または[bio-rad.com/QX200PromoJP](https://www.bio-rad.com/QX200PromoJP)にアクセスして、事前エントリーをお願いします。エントリー後、弊社からご連絡いたします。

QX200スタートアップ応援オファーの詳細や、その他のご相談もこのフォームからお問い合わせいただけます。

Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格*
1864001JA	QX200 ddPCR システム 構成品: QX200 Droplet Reader, QX200 Droplet Generator, 解析用PC, アクセサリー	¥8,500,000	¥6,800,000

*キャンペーン価格での購入には事前エントリーが必要です

BIO-RAD, DDPCR, DROPLET DIGITAL, and QX200 are trademarks of Bio-Rad Laboratories, Inc., in certain jurisdictions. All trademarks herein are the property of their respective owner. © 2025 Bio-Rad Laboratories, Inc. EveGreen is a trademark of Biotium, Inc. Purchase of Digital PCR and/or Single-Cell NGS Sample Preparation products (the "Products") from Bio-Rad Laboratories is subject to Bio-Rad Laboratories, Inc. Standard Terms and Conditions of Sale, which can be accessed at <https://www.bio-rad.com/en-us/terms-conditions>. Unless we expressly state otherwise in additional Terms and Conditions, no rights are granted for you to distribute or resell the Products. Unless we expressly state otherwise in additional Terms and Conditions, no rights are granted for the development or commercialization of diagnostic assays for use with the Products without a license from Bio-Rad. It is the user's obligation to obtain a commercial license from Bio-Rad for (i) all commercial uses (not just diagnostic uses) and (ii) sale of assays for use on Bio-Rad's dPCR and ddSEQ instruments. The Products and/or their use are covered by U.S. and foreign patents and/or pending patent applications owned by or under license to Bio-Rad Laboratories, Inc. See <https://www.bio-rad.com/en-us/trademarks>.

※記載の製品は研究用であり、診断目的にはご利用いただけません。

※価格、仕様などは予告なく変更することがありますので、ご了承ください。価格は2025年6月現在のもので、メーカー希望小売価格（税別）です。



バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

取扱店

Life Science
Group

〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24
※学術的お問い合わせは TEL:03-6404-0331

TEL:03-6361-7000

Z13988L 2505a